

*feel the  
difference*



# NETTI PRECISION™ SITZKISSEN

Die nächste Generation des Hautschutzes mit Ergomise™ Technology

# NEXT GENERATION

## skin protection

Gesundes Sitzen ist die Grundlage für Dekubitusprophylaxe. Die hochwertigen Netti Precision Kissen setzen neue Maßstäbe in puncto Sitzstabilität, Druckverteilung und Hautschutz - unabhängig davon, ob die Nutzer einen Power-, Aktiv- oder Komfortrollstuhl verwenden.

Unsere Spezialisten für Sitzkomfort haben jeden Aspekt der Kissen optimiert - von der Druckverteilung über die gezielte Entlastung gefährdeter Körperstellen bis hin zur Reduktion des Spitzendrucks und zur Materialwahl. Das Ergebnis: hochmoderne Multi-Härte-Kissen, die dank der Ergomise™ Technology außergewöhnlichen Komfort, hohe Stabilität und fortschrittlichen Hautschutz bieten - Netti Precision 1 und Netti Precision 2.

Wir haben ein ausgewogenes Verhältnis von weichen und festen Stützzonen entwickelt, das eine stabile Sitzhaltung und optimalen Hautschutz unterstützt. Die Kissen sind für das Langzeit-Sitzen sowie für Nutzer mit empfindlicher Haut oder hohem Dekubitusrisiko konzipiert. Netti Precision™ Sitzkissen sind sofort einsatzbereit, hygienisch und langfristig zuverlässig.

### EINFACH, SCHNELL UND SICHER IN DER ANWENDUNG

- ✓ Sofort einsatzbereit.
- ✓ Keine individuelle Anpassung erforderlich.
- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Hygienisch: Der Kern ist bei 65° C maschinenwaschbar und trocknet schnell.
- ✓ Kein Risiko falscher Anwendung – da keine Einstellungen nötig sind.



### MULTI-HÄRTE-KISSEN FÜR HAUTSCHUTZ UND STABILITÄT

Dank der Ergomise™ Technology fertigen wir Kissen mit intelligenten Zonen und Schichten - von superweich bis fest. Die abgestuften Härtegrade sorgen für gezielte Beckenstabilität sowie eine optimale Druckverteilung und -entlastung.



*feel the difference*



## NETTI PRECISION 1

- ✓ Für Nutzer mit erhöhtem Risiko für Haut- und Druckverletzungen.
- ✓ Optimale Druckverteilung und -entlastung.
- ✓ Gezielter Schutz knöcherner Bereiche.
- ✓ Beckenunterstützung für eine stabile und funktionelle Sitzposition.
- ✓ Effektives Einsinken verringert das Risiko des Vorwärtsrutschens.




## NETTI PRECISION 2

- ✓ Für Nutzer mit sehr empfindlicher Haut und hohem Risiko für Hautschäden oder bereits bestehende Verletzungen.
- ✓ Hervorragende Druckverteilung und -entlastung.
- ✓ Spezielle Entlastungszonen für Steißbein und Beckenboden.
- ✓ Stabile Beckenführung für eine gesunde Sitzposition.
- ✓ Effektives Einsinken verringert das Risiko des Vorwärtsrutschens.




## ERSTELLT MIT ERGOMISE™ TECHNOLOGY

Mit der Ergomise™ Technology stellen wir sicher, dass unsere Kissen evidenzbasierte Ergebnisse liefern. Die Netti Precision™ Sitzkissen und die zugrunde liegende Technologie wurden nicht nur intern, sondern auch am Testinstitut der Universität Pittsburgh erfolgreich geprüft – mit nachweislich beeindruckender Leistung\*.

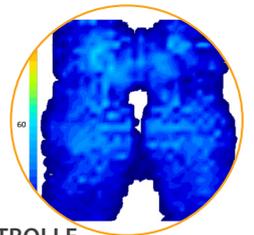


### TEMPERATURKONTROLLE

Erhöhte Temperaturen begünstigen Feuchtigkeit, und damit das Risiko von Hautschäden. Das Material der Netti Precision™ Sitzkissen trägt nachweislich zur Temperaturregulation bei: Laut dem Testinstitut der Universität Pittsburgh beträgt die Kontakttemperatur zwischen Nutzer und Material nach 3 Stunden nur 32,7° C – im Vergleich zu Temperaturen zwischen 33,7° C und 35,7° C bei ähnlichen Produkten\*.

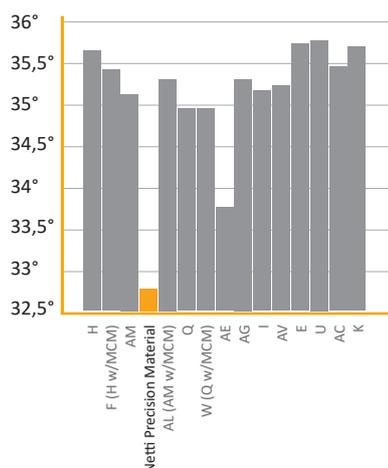


### KONTROLLE DER FEUCHTIGKEIT

Feuchtigkeit über 60% erhöht die Empfindlichkeit der Haut und fördert Reibung – ein Risikofaktor für Druckverletzungen. Ziel der Netti Precision Kissen ist es, die Feuchtigkeit an der Hautoberfläche niedrig zu halten. Die Universität Pittsburgh dokumentiert bei Kissen mit Netti Precision Material nach 3 Stunden ein Feuchtigkeitsniveau von 62% - im Vergleich zu durchschnittlich 81,2% bei 14 getesteten Alternativkissen\*.

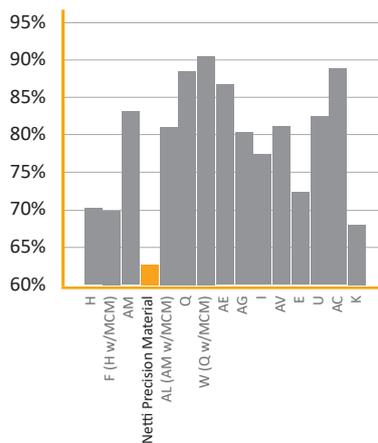

### SPITZENDRUCKKONTROLLE

Ist ein Dekubitus erst entstanden, folgen oft langwierige Behandlungen, Krankenhausaufenthalte und starke Schmerzen. Netti Precision™ Sitzkissen setzen frühzeitig an: Sie bieten eine gezielte Druckumverteilung - ein zentraler Baustein in der Dekubitusprophylaxe. Sitzdruckmessungen belegen, dass Netti Precision™ andere druckentlastende Kissen bei der Reduktion von Spitzendruck übertrifft\*.

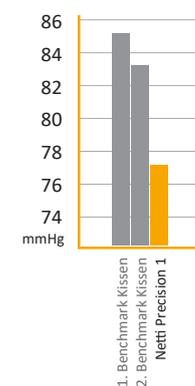

# Ergomise™ Technology

Die Ergomise™ Technology vereint digitale Modellierung mit tiefgreifender Expertise im Bereich des therapeutischen Sitzens. Das Resultat: evidenzbasierte, leistungsstarke Sitzkissen für anspruchsvolle Nutzer.

<b>Kernmaterial</b>	Der Kern besteht aus biokompatiblen thermoplastischem Polyurethan (TPU) – frei von zugesetzten Phthalaten.
<b>Bezugmaterial</b>	Zwei Bezugsvarianten stehen zur Wahl: <ul style="list-style-type: none"><li>• Stella+ Bezug: atmungsaktiv, dehnbar, mit integrierter Schaumstoffeinlage</li><li>• Easy Care+ Bezug: abwaschbar, atmungsaktiv mit integrierter Schaumstoffeinlage</li></ul>
<b>Größe, mm (Sitzbreite x Sitztiefe)</b>	Die Netti Precision™-Kissen sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich, passend zu den gängigsten Sitzmaßen. Gerne kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Größe benötigen. 350 x 400, 350 x 450, 350 x 500 380 x 400, 380 x 450, 380 x 500 400 x 400, 400 x 450, 400 x 500, 400 x 550 430 x 400, 430 x 450, 430 x 500, 430 x 550 450 x 400, 450 x 450, 450 x 500, 450 x 550 500 x 450, 500 x 500, 500 x 550 550 x 500, 550 x 550 600 x 500, 600 x 550
<b>Reinigung</b>	Der Kern ist bei bis zu 65° C maschinenwaschbar und trocknet dank seiner atmungsaktiven Struktur schnell an der Luft. Die Bezüge können bei 60° C gewaschen werden.
<b>Max. Benutzergewicht</b>	Die Kissen sind entsprechend ihren Abmessungen proportioniert und haben ein maximales Benutzergewicht von 160 kg.



## MEYRA GROUP

MEYRA GmbH | Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Deutschland  
info@meyragroup.com | Tel.: +49 5733 922 - 0 | Fax: +49 571 93292-001 | www.meyra.de

2025-05 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.  
Ident-Nr. 261520000